

歯科用

friend
SAM®

サムフレンド歯ブラシ

2Way

今日から始めよう 2Wayブラッシング!!

歯ブラシ1本で歯間・歯頸部・歯面のプラークを落とせたらいいな・・・
患者さんがラクに効率良くブラッシング出来たらいいな・・・
2Wayはそんな歯科衛生士さんの願いから生まれました。



● 毛の太さ 根元 0.17mm ● 材質 毛/飽和ポリエステル樹脂 柄/PP ● 耐熱温度 80℃



2段植毛

超極細テーパース毛を歯間に挿入すると、自然とラウンドエンド毛が歯面にあたります。



2列植毛

歯頸部の形態にフィットするのでムダなく、しかも歯間乳頭を傷つけることなく隣接面を磨くことができます。



サムフレンド歯ブラシ 2Way

患者参考価格 1本 250円(税別) 販売単位 1箱12本入

今日から始めよう2Wayブラッシング!!

患者さんに、より簡単に2Wayの特長を活かして磨いていただくために、以下の手順でのブラッシング指導をおすすめしています。

まず 特長を理解していただきましょう。




超極細テーパー毛とラウンドエンド毛の2段・2列植毛です。



超極細テーパー毛が歯間に挿入されると自然にラウンドエンド毛が歯面に当たり、隣接面と歯面を同時に磨くことができます。

2Wayは
歯ブラシと歯間ブラシの
役割をします。

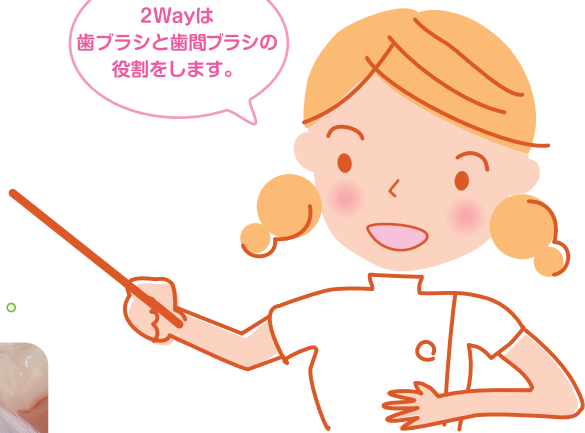

次に ブラシの大きさをわかっていただきましょう。



下顎前歯部のおよそ3本分



小臼歯のおよそ2本分



大臼歯のおよそ1本分

では 磨き方を説明しましょう。



歯面へのあて方は
下顎の前歯部で指導すると
実感が得られます。

Step.1


2Wayを歯頸部に直角にあてます。歯牙の方に力かけるとテーパー毛は歯間部に入り、ラウンドエンド毛は歯面にあたります。



Point



✕
ポケットに入れようと力かけると痛みが出ます。

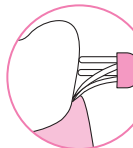

○
ブラシを歯に直角にあててください。毛先は自然とポケットの方向に向きます。



Step.2

両サイドの毛束が歯間からはすれないように気をつけながら円を描くように動かすと、毛束が広がり歯面・歯頸部・隣接面を一度に磨くことができます。



Step.3


臼歯部から前歯部へ向けて1本ずつ、磨いていきます。



Step.4

舌側、口蓋側はスクラッピングの要領で。前歯舌側面はStep1のあて方でおこなってください。

超極細テーパー毛が
歯頸部や歯間隣接面の
プラークをきれいに
除去します。

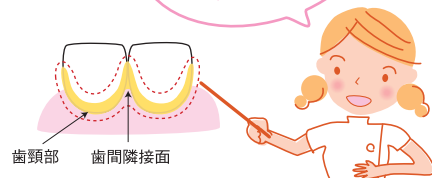

Point

叢生や矯正装置・インプラント周辺など通常のブラシでは届きにくい部位へも容易に毛先が届きます。



Point

歯間の広いところは2Wayを縦にすると、毛束が入り歯間ブラシの役割もします。歯間ブラシが苦手な方にもおすすめです。

Point

歯ブラシの交換は3~4週間を目安にテーパー毛が開いてきたら、交換することを患者さんにアドバイスしてください。

