


半焼結ジルコニア調整用キット

EVE エコセラム WG スターターキット

- | | | |
|-----|------------------------|----|
| 内容品 | EVE エコセラム WG R22m-WG | 2個 |
| | EVE エコセラム WG H334Km-WG | 1個 |
| | EVE マンドレル 78HP | 2本 |
| 価格 | ¥1,000/キット | |

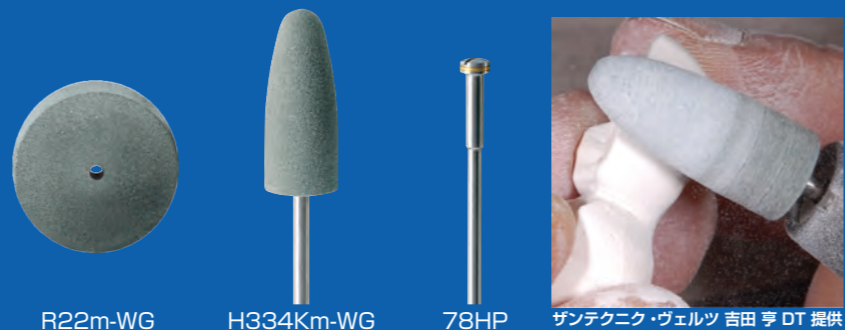

R22m-WG

H334Km-WG


78HP

ザンテック・ヴェルツ 吉田 亨 DT 提供

焼成後のジルコニアの調整から光沢研磨用キット

EVE ジルコニア 調整 & 研磨キット HP用

- | | | |
|-----|-----------------------|----|
| 内容品 | EVE ダイヤセントプラス DYP-13g | 1個 |
| | EVE ダイヤセントプラス DYP-9g | 1個 |
| | EVE ダイヤボール H22Dg | 1個 |
| | EVE ダイヤセラ L26DCmf | 1個 |
| | EVE ダイヤボール S3Dg | 1個 |
| | EVE ダイヤボール C2Dmf | 1個 |
| | EVE ダイヤボール H2Dmf | 1個 |
| | EVE マンドレル M20HP | 1本 |
| | EVE マンドレル M30HP | 1本 |
| 価格 | ¥12,400/キット | |

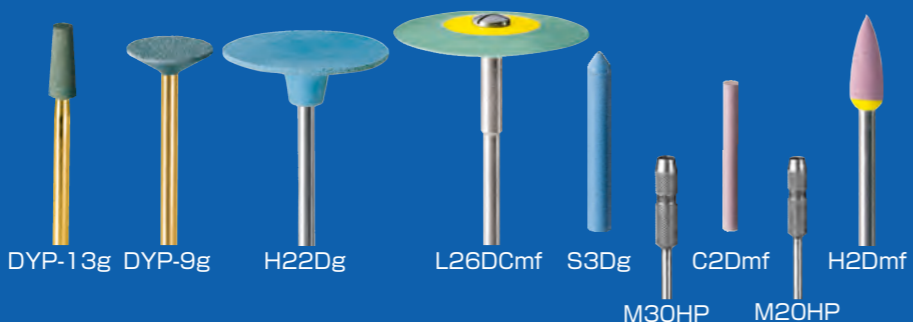

DYP-13g

DYP-9g

H22Dg

L26DCmf

S3Dg

C2Dmf

H2Dmf

M30HP

M20HP

焼成後のジルコニアの調整から光沢研磨用キット

ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット

- | | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 内容品 | ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト | 1個 |
| | ハトー アストロブラシ #9-100 | 1本 |
| | ハトーブラシ (ハンドピース用) 100-10PP(R22) | 1本 |
| 価格 | ¥9,800/キット | |



#9-100

100-10PP

EVE ダイヤセントプラス 27B2X00041000096, EVE エコセラム WG 27B2X00041000149, EVE ダイヤセラ 27B2X00041000097, EVE ダイヤボール 27B2X00041000094, EVE マンドレル 27B2X00041000159, ハトーブラシ (ハンドピース用) 27B2X00041000039, ハトー アストロブラシ 27B2X00041000141, ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト 27B2X00041000175, EVE エコセラム WG スターターキット 27B2X00041000198, EVE ジルコニア 調整&研磨キット HP用 27B2X00041000197, ハトー ジルコニア 最終光沢研磨キット 27B2X00041000177 全て一般医療機器



半焼結ジルコニアの調整・研磨
ジルコニア焼成後の研削・調整・スプルー除去
ジルコニア焼成後の研磨

焼成後の研磨をラクにするために…

EVE エコセラム WG ジルコニア半焼結体用研磨ポリッシャー

切削後の半焼結体を研磨することで、
焼成後の調整&研磨をカンタン&スピーディーに！

柔らかい半焼結ジルコニアを調整することで、焼結後の研削時間を短縮可能
焼成後の面がスムーズでツヤが出て、研磨工程の作業時間も短縮可能

- やわらかいので、マージン調整もカンタン
- やわらかいので、ドレッサーで形状変更がカンタン
- やわらかいので、チップ・クラックを防ぐ
- 着色料無配合で、着色の心配がない

粒度：中目
推奨回転数：4,000~7,000rpm
最大回転数：10,000rpm

品番	R22m-WG	H334Km-WG
価格	¥1,260/10本	¥5,190/10本

注意：シンタリングリキッドをご使用の場合は、滑沢にしすぎると、
溶液が半焼結体に染み込みにくいことがあります。

EVE エコセラム WG スターターキット
ホイール型 ×2、砲弾型 ×1、マンドレル ×2をセットにした、お得な
スターターキット。
ホイール型の1つは、ご自身の好きな形状（ナイフエッジ型等）にドレ
ッサーで整えてください。

¥1,000/セット



ドレッサーで尖らせる



隣接面のスムージングが可能




スプルーをチップなしに除去



マージン部の調整も可能

焼成後に調整が必要な場合やスプルーのカットは…

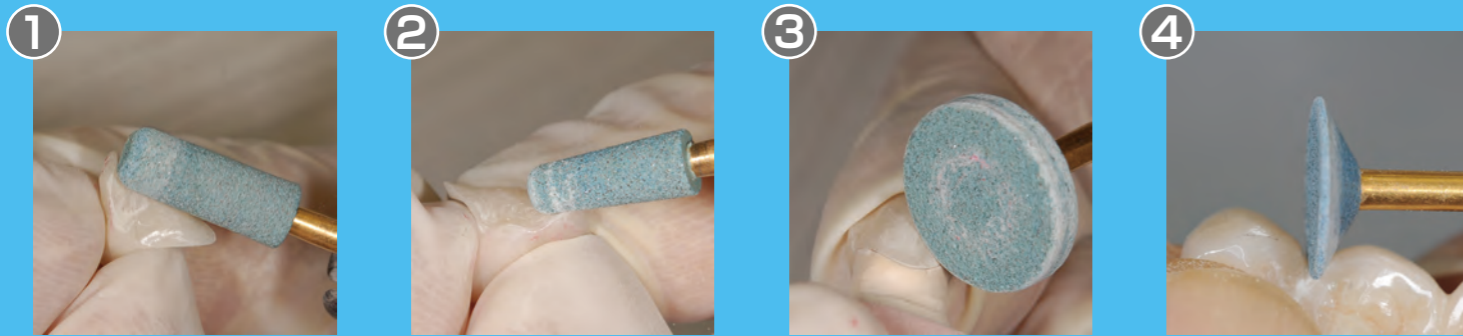

EVE ダイヤセントプラス シルコニア焼結体用切削ポリッシャー

注水ナシで発熱を抑えザクザク研削！


通常のカーボランダムに比べキメが細かいので、研削後の状態が良い
多孔性で空気層を含みながら研削するので、ジルコニアのクラックの
原因となる熱を防ぐ

粒度：荒目
推奨回転数：8,000～12,000rpm
最大回転数：25,000rpm

品番	① DYP-14g	② DYP-13g	③ DYP-8g	④ DYP-9g
価格 [1入]	¥1,900	¥1,430	¥1,900	¥1,900



EVE エコセラム WG でジルコニア半焼結体をスムージングし焼成した後、
または焼成後に EVE ダイヤセントプラスで研削・調整した後は…

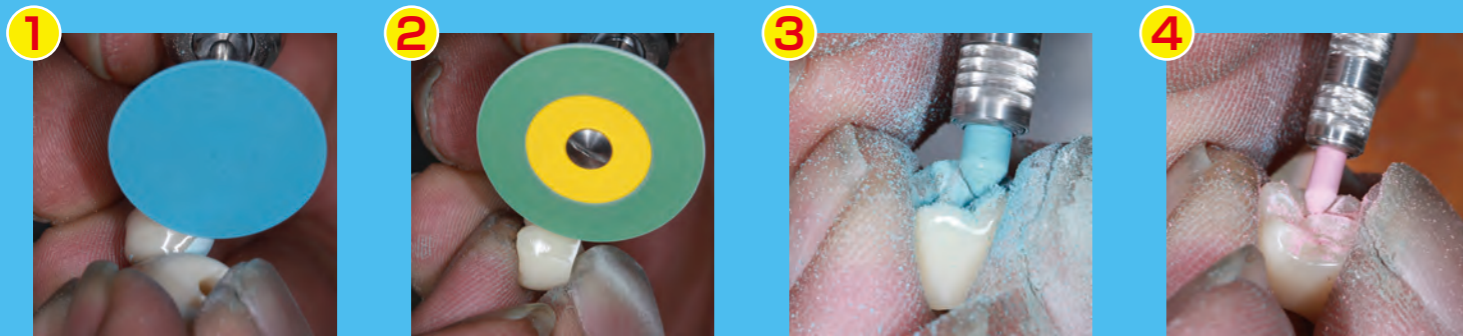

① 厚さ 0.5mm で薄く柔軟性が
あり隣接面の深部の研磨に

② 平坦部や隣接面の研磨に

③ 裂溝部の中研磨に

④ 裂溝部の光沢研磨に

EVE ダイヤセラ シルコニア焼結体用研磨ポリッシャー

軽くこするだけでツヤが出る！

微細なダイヤモンド砥粒を多く含有し、軽くこするだけでツヤを出す
焼成後のジルコニア専用ポリッシャー。

粒度：中目
推奨回転数：7,000～12,000rpm
最大回転数：20,000rpm

品番	② L26DCmf	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf
価格 [1入]	¥5,600	¥3,690	¥1,280	¥1,280



EVE ダイヤボル ポーセレン・メタル等用研磨ポリッシャー

ポーセレン研磨の定番！メタル・ハイブリッドレジンにも！

粒度：荒目
推奨回転数：5,000～10,000rpm
最大回転数：20,000rpm

粒度：荒目
推奨回転数：7,000～12,000rpm
最大回転数：20,000rpm

粒度：荒目
推奨回転数：7,000～15,000rpm
最大回転数：25,000rpm

粒度：中目
推奨回転数：7,000～12,000rpm
最大回転数：20,000rpm

粒度：中目
推奨回転数：7,000～15,000rpm
最大回転数：25,000rpm

品番	L26Dg	① H22Dg	H2Dg	H8Dg	③ S3Dg*2	C2Dg*3	⑤ H2Dmf	H8Dmf	S3Dmf*2	④ C2Dmf*3
価格 [1入]	¥5,420	¥3,200	¥1,150	¥1,150	¥1,050	¥660	¥1,150	¥1,150	¥1,050	¥660
価格 [10入]		¥27,000	¥9,800	¥9,800			¥9,800	¥9,800		

ハトー ポリスター プロ ダイヤモンドペースト

ジルコニアの最終光沢研磨に！ナチュラルな光沢をもたらす！

- 2μm の天然ダイヤモンド砥粒配合で、
- ① より効果的に素早く研磨
 - ② ツヤ出しだけではなく若干の研磨能力により、より平坦で凹凸を最小限に仕上げる
 - ③ 研磨最中はペーストのローズ色が乗り、滑沢になると油分を含まない地色が現れる
 - ④ ペーストをブラシに塗布する際、回転するブラシを押し付けても飛び散らない

価格 ¥9,800/12g



ハトーブラシ (ハンドピース用) 10,000


100-10PP (R22)

咬合面や裂溝部専用のブラシ。
メタルコア部が小さいので、通常のブラシよりも
繊細な作業が可能
価格 ¥4,000/12本




ハトー アストロブラシ #9-100


歯面部はタッピング効果により効率良く
研磨が行え、隣接面や咬合面にもブラシ
の毛先が入り込みやすい
価格 ¥1,780/12本
¥14,000/144本

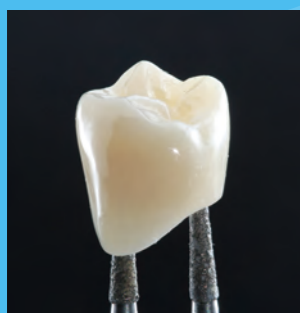


株式会社 S.T.F
藤松 剛 DT 提供

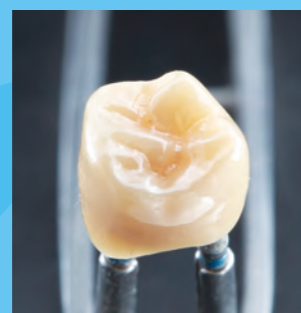

株式会社 S.T.F
藤松 剛 DT 提供

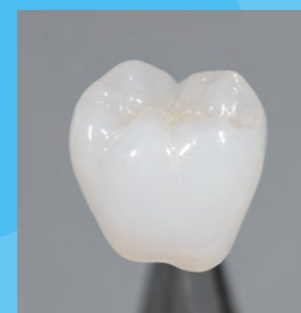

ザンテック・ヴェルツ
吉田 亨 DT 提供

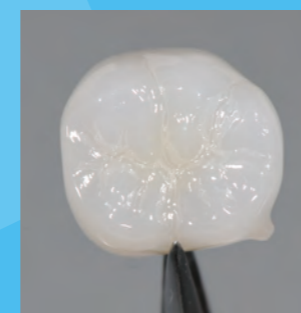

ザンテック・ヴェルツ
吉田 亨 DT 提供