


ブリッジの支台歯形成時に、
支台歯間の平行関係の測定が容易にできます。




PARA MIRROR 平行測定器

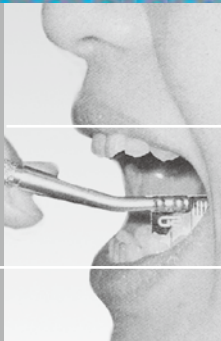

パラミラーを口腔内に挿入した時、一時的に曇る場合があります。
口腔内に挿入する前にパラミラーを温めてご使用ください。

ブリッジの作製時には、支台歯間の平行性を確立することが最も重要です。
それによって歯質の削除量を最小限にとどめると同時に多数歯を平行に形成することができます。

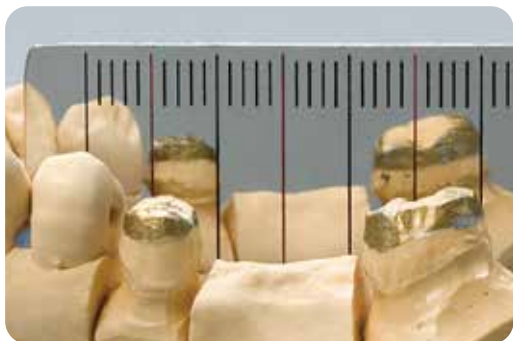

- パラミラーはステンレスを鏡面仕上げにしており、鏡面に支台歯が平行線上に映り、平行測定が極めて容易にできます。
- パラミラーを平行にスライドさせることにより、多数歯の平行性を簡単に測定できます。
- 黒と赤の交互のラインはわかりやすく正確に測定できます。
- 上縁にミリ単位の刻みがあるため精密に測定できます。
- オートクレーブ滅菌が可能です。
- 鏡面は傷が付きやすいので取り扱いにはご注意ください。

販売名:SD パラミラー
分類:一般医療機器
届出番号:08B3X10007000111