

ヤマモト 防塵マスク 3200A

ヘッドバンドタイプ



定価：¥7,000(20枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3200B

サイドバンドタイプ



定価：¥7,000(20枚入)

- 柔らかいノーズシールと不織布を採用。フィット感と肌触りが良くなりました。
- 金属パーツ不使用で環境に配慮

項目	YAMAMOTO 3200	
	社内基準値	実測値 (平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.30%
呼吸抵抗値	50Pa以下	42.2Pa
排気抵抗値	50Pa以下	42.2Pa
質量	15g以下	A:10.0g B:11.4g
使用限度時間	17時間	17時間

ヤマモト 防塵マスク 3200VA


ヘッドバンドタイプ
排気弁付



定価：¥4,800(10枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3200VB

サイドバンドタイプ
排気弁付

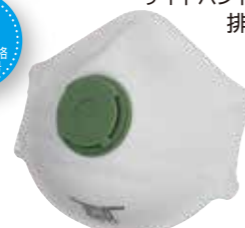

定価：¥4,800(10枚入)

- 柔らかいノーズシールと不織布を採用。フィット感と肌触りが良くなりました。
- 金属パーツ不使用で環境に配慮
- 排気弁付で呼吸が楽に行える

項目	YAMAMOTO 3200V	
	社内基準値	実測値 (平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	98.90%
呼吸抵抗値	70Pa以下	46.2Pa
排気抵抗値	70Pa以下	46.2Pa
質量	15g以下	A:15.9g B:16.3g
使用限度時間	19時間	19時間

ヤマモト マスク 7500 N95 対応マスク



定価：¥4,800(20枚入)

ヤマモト マスク 7500V N95 対応マスク 排気弁付



定価：¥5,900(20枚入)

- メタルフリー
- 保管・携帯に便利な折りたたみ式
- 衛生的な個装包装

項目	YAMAMOTO 7500 N95マスク	
	社内基準値	実測値 (平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.10%
呼吸抵抗値	50Pa以下	39Pa
排気抵抗値	50Pa以下	39Pa
質量	12g以下	7.8g
使用限度時間	9時間	9時間

ヤマモト 防塵マスク 3600A 活性炭

ヘッドバンドタイプ



定価：¥10,000(20枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3600B 活性炭

サイドバンドタイプ



定価：¥10,000(20枚入)

- 吸水素材のノーズシールで汗によるムレ、不快感を解消
- メタルノーズブリッジ採用でフィット感向上
- 活性炭入で、不快臭・有機溶剤臭を軽減

項目	YAMAMOTO 3600	
	社内基準値	実測値 (平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.10%
呼吸抵抗値	50Pa以下	A:29.2Pa B:39.4Pa
排気抵抗値	50Pa以下	A:29.2Pa B:39.4Pa
質量	17g以下	A:10.7g B:12.5g
使用限度時間	14時間	14時間

ヤマモト 防塵マスク 3100A

ヘッドバンドタイプ



定価：¥7,000(20枚入)

ヤマモト 防塵マスク 3100B

サイドバンドタイプ



定価：¥7,000(20枚入)

- 吸水素材のノーズシールで汗によるムレ、不快感を解消
- メタルノーズブリッジ採用でフィット感向上

項目	YAMAMOTO 3100	
	社内基準値	実測値 (平均)
粒子捕集効率	95.0%以上	99.10%
呼吸抵抗値	50Pa以下	39.4Pa
排気抵抗値	50Pa以下	39.4Pa
質量	16g以下	A:8.0g B:9.7g
使用限度時間	12時間	12時間

使い捨て式防塵マスクの分類

厚さ・NOSH規格	DS1	DS2/N95	DS3/N99
粒子捕集効率	80%以上	95%以上	99.9%以上



吸水素材で汗によるムレ、不快感を解消。また上部からの漏れを防止



調整可能なノーズブリッジにより、あらゆる鼻の形状にフィット

掲載商品の価格は小売価格で、2017年9月現在のものです。価格には消費税は含まれておりません。「ヤマモト防塵マスク」シリーズは山本光学株式会社製です。

SD オールフィットグラス SN-770



テンブルチップには肌に優しいノンスリッパ採用



ソフトノーズクッション&ソフトフレームクッション



キズの付きにくいハードコートと、くもり止め機能を両立したPET-AFレンズ

トリプルファンクションフレーム機能により、フィット感も思い通り！

女性・男性問わず、メガネの上から装着しやすいオーバークラス

① フレーム幅が変わる



フレームの幅を3段階に調整可能

② フレックスフレーム



フレックスフレームシステム採用。フレーム部のみが動くので、高い防護性能をキープし顔側面にフィット

③ テンプル角度調整可能



テンブル角度を5段階で調整可能

オーバークラス 医院価格 ¥4,500

サイズ W157×H57×D159mm 重量 54g PET-AFレンズ (ハードコート&くもり止め、紫外線カット [99.9%以上の紫外線] レンズ) 注意：装着されているメガネのフレームサイズにより本製品と干渉してしまう恐れがあります。

SD 超軽量グラス・シールド YF-850 反射防止 S
YF-850 反射防止 L


- 従来品 (YF-800) と比較して、
- 乱反射やギラツキを抑え、液体飛沫から守ります。
 - ストレスのない視界で施術が可能です。



YF-850

背面から撮影

前面から撮影

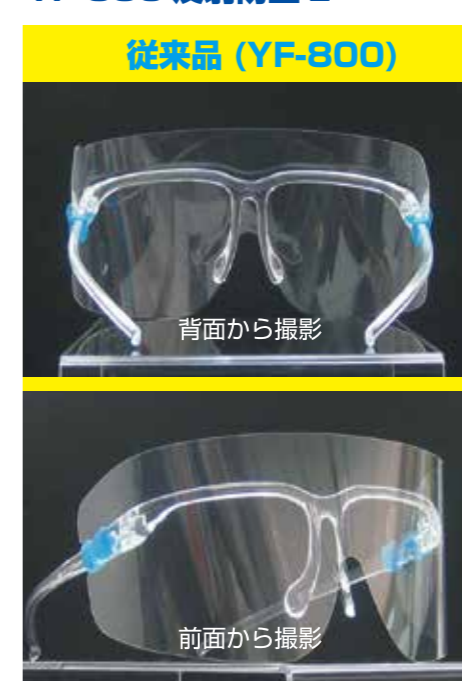

従来品 (YF-800)

背面から撮影

前面から撮影

- 両面反射防止処理 (反射率 1%以下)
- 高い透過率 (可視光線透過率 99%以上)
- 普段ご使用のメガネと併用可能
- YF-800 フレーム使用可能
- レンズ交換可能
- レンズサイズ：S グラスタイプ L シールドタイプ
- 重量：S 17g L 23g



本体 Sサイズ ¥2,800
Lサイズ ¥4,000
(スペアレンズ2枚付)

スペアレンズ Sサイズ ¥3,200
(4枚入) Lサイズ ¥5,000

L-fit LF-400 シリーズ

- L-fit シリーズ最上位モデル
- レンズ上部ひさしカバー採用
- ノンスリップラバーテンブル採用
- デュアルノーズパッド採用
- ツインレンズ採用

カラー：●ブルー ●ピンク
重量：27g 定価：¥1,980



UV
カット
レンズ上部
ひさしカ
バー
ノンスリ
ップラバ
ーテンブ
ル
デュアル
ノーズパ
ッド
ツイン
レンズ
くもり
止め加工

L-fit LF-100 シリーズ

- 豊富なカラーバリエーション
- 機能を省略して低価格を実現!
- ツインレンズ採用
- デュアルノーズパッド採用
- 自然に側頭部に沿う形状のテンブルで長時間装着でも疲労を軽減!

カラー：●ブルー ●スモーク ●ブラウン
●ピンク ●イエロー ●オレンジ
重量：24g 定価：¥1,650

衛生士用
メガネ



UV
カット
デュアル
ノーズパ
ッド
ツイン
レンズ
くもり
止め加工

SD 超軽量グラス・シールド YF-800L

カラー：○クリア 重量：26g
定価：¥2,500 (スペアレンズ 3 枚付)
別売：¥3,200 (スペアレンズ 6 枚)

シールド
タイプ
くもり
止め加工
シールド
交換可能
メガネ
併用可能

SD 超軽量グラス・シールド YF-800S

カラー：○クリア 重量：18g
定価：¥2,000 (スペアレンズ 3 枚付)
別売：¥1,800 (スペアレンズ 6 枚)

グラス
タイプ
くもり
止め加工
シールド
交換可能
メガネ
併用可能

SD パノラマグラス YS-1330

カラー：●ブラウン
重量：43g
定価：¥3,050

レンズ
交換可
上ひさし
サイド付
ハード
コート

SD オールフィットグラス SN-735

カラー：●ブルー ●クリア
●クリスタルグリーン
重量：44g
定価：¥3,800

UV
カット
くもり
止め加工
テンブル
長さ調整
テンブル
角度調整
上ひさし
サイド付
クッション
ンバー付

SD オールフィット・オーバーグラス SN-737

カラー：●ブルー ●クリア
重量：49g
定価：¥4,500

UV
カット
くもり
止め加工
テンブル
長さ調整
クッション
ンバー付
メガネ
併用可能
上ひさし
サイド付

SD ニューゲストグラス SN-338

カラー：○クリア
重量：43g
定価：¥1,500

UV
カット
上ひさし
サイド付
クッション
ンバー付
メガネ
併用可能

SD オールフィット・オーバーグラス遮光用 SNW-717

カラー：●ブルー
重量：47g
定価：¥6,000

UV
カット
テンブル
長さ調整
テンブル
角度調整
上ひさし
サイド付
クッション
ンバー付
ハード
コート
ソフト
テンブル
メガネ
併用可能

SD ウェルディンググラス 遮光用 337W

カラー：●ブラウン
重量：43g
定価：¥3,500

UV
カット
上ひさし
サイド付
クッション
ンバー付
メガネ
併用可能
ハード
コート

SD レーザー用メガネ YL-717

ヤグや炭酸ガスなど歯科用医療機器で使用されるレーザー機器用各種コーティングが選択可能
カラー：○グレー
重量：49g
コーティング種類や価格については、弊社までお問い合わせください。

UV
カット
テンブル
長さ調整
上ひさし
サイド付
クッション
ンバー付
メガネ
併用可能

SD ミストレスゴーグル YG-5300

カラー：○クリア 重量：85g
定価：¥2,000
別売：¥900 (替えレンズ)

UV
カット
くもり
止め加工
レンズ
交換可能
メガネ
併用可能

SD 光重合用メガネ

光照射器から照射される有害な紫外線をカットし、大切な目を守ります。
カラー：●ブラック
重量：43g
定価：¥3,000

テンブル
長さ調整

SD めがねくもり止め デミスト3

○レンズの内側にスプレーし、しばらくしてふき取るだけ
○一般のメガネにも使用可能
容量：45ml
定価：¥1,800



SD メガネストラップ

定価：¥700

- レンズ上部ひさしカバー*
レンズ上部からの飛沫を防ぎ、より一層感染予防に貢献
- ツインレンズ
日本人の顔に合わせた新設計形状によりすき間なくフィット
- デュアルノーズパッド
鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能
まつげや頬がレンズに触れてしまう場合は、HIGHに
- くもり止めハードコートレンズ
安全で快適な視界を確保
写真は視界イメージ

SD セーフティグラス YS-390

抜群の防護性能と快適なフィット感を実現!
カラー：●オレンジ ●ネイビー ●ブラック
重量：31g 定価：¥3,500
別売：¥2,500 (スペアレンズ 1 組)



UV
カット
ソフト
テンブル
ソフト
鼻パッド
レンズ
交換可

装着性を追求したジャパンフィット設計

日本人 欧米人

日本人の頭部形状データをもとに、装着時の重量バランスを考慮して設計。長時間の装着でも違和感のないフィット感を実現。日本人に合わせた、より快適な装着性と使用感を実現する。それがジャパンフィットです。

※あくまで一般的なイメージイラストです

日本人の頭部形状データをもとに、装着時の重量バランスを考慮して設計。長時間の装着でも違和感のないフィット感を実現。日本人に合わせた、より快適な装着性と使用感を実現する。それがジャパンフィットです。

フレックスフレームシステム

フレックスフレームシステム採用。フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性能と光学性能をキープしたままジャストフィットします。

山本光学製保護メガネの特長

- 1 日本人の顔面形状を研究し開発され、フィット感が抜群な保護メガネを提供
- 2 ベトロイドレンズを採用
 - キズが付きにくい
 - 衝撃に強い
 - UV カット (有害な紫外線を 99% 以上カット)

保護メガネ洗浄方法

1. 中性洗剤 (台所用など) を用い柔らかいスポンジもしくは指で流水下で洗浄
2. “デミスト3” をシールド部の両面に噴霧し、指で軽く薄く伸ばす
3. しばらくして半乾きになればメガネ拭きや柔らかい布で優しく拭きあげる

注意

- ★ 中性洗剤以外 (アルコールなどを含む) は使用できません。
- ★ オートクレープなどでの滅菌はできません。