



STERILIZATION

滅菌ポーチ

デュオ・チェック® 滅菌ポーチ



- ヘビーシール**
内容物が抜け落ちないよう山型シールをバッグ内下部に付加
- 医療用グレード・ペーパー**
医療用ペーパー基準に合致する、湿気に強い医療用グレード・ペーパーを使用
- 透明フィルム**
内部カラーインジケーター、バッグ内器具が鮮明に見える透明フィルムを使用
- 幅広・粘着密封セルフ・シール**
操作しやすい幅広の完全密封シール
- ミシン目付・折り目ライン(粘着密封セルフ・シール部)**
バッグ内に空気が入らず、キッチリと密封しやすいように折り目ラインにはミシン目が施されている
- フィルムとペーパーの分離**
バッグ開封時はフィルムとペーパーが完全分離するので、滅菌済みインスツルメントが外側フィルム、ペーパーに触れ汚染されることはない




- サム・ノッチ**
バッグ上部中央のサム・ノッチ(ペーパー部カット部分)から簡単にフィルム/ペーパーを分離可能
- 上部コーナー・タック**
滅菌後、フィルム/ペーパーを分離しやすく、また滅菌済み滅菌バッグを保管しやすくする
- カラーインジケーターについて**
滅菌バッグ内部/外部にカラーインジケーターを装備
オートクレープ滅菌:
ピンク色が薄茶色に変色で滅菌完了
ガス滅菌:
ブルー色が濃い茶色に変色で滅菌完了
オートクレープ滅菌、ガス滅菌対応

寸法(外寸)	入り数	製品コード	
5 x 20 cm (2" x 8")	200 /箱	SCZ	価格: ¥2,400
6 x 10 cm (2.25" x 4")	200 /箱	SCXX	価格: ¥2,100
7 x 23 cm (2.75" x 9")	200 /箱	SCX	価格: ¥2,300
9 x 13 cm (3.5" x 5.25")	200 /箱	SCXS	価格: ¥2,300
9 x 23 cm (3.5" x 9")	200 /箱	SCS	価格: ¥2,400
13 x 25 cm (5.25" x 10")	200 /箱	SCM	価格: ¥3,700
19 x 33 cm (7.5" x 13")	200 /箱	SCL	価格: ¥7,500
25 x 38 cm (10" x 15")	100 /箱	SCL1015	価格: ¥8,000
30 x 46 cm (12" x 18")	100 /箱	SCL1218	価格: ¥9,000



INSTRUMENT PACKAGING & MONITORING

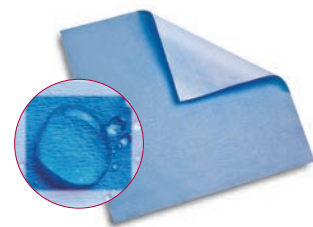

CSR滅菌ラップ

- 風呂敷タイプの正方形滅菌ラップ
- 高レベルのバクテリア捕集(遮断)(BFE)が可能
- 高レベルの浸透性(湿布ではありません)
- 空中飛散バクテリア、飛沫水溶液からの感染を防御
- 防水性、防アルコール性、防ヨード性が非常に高い
- オートクレープ滅菌、ガス滅菌、ガンマー放射滅菌、E-beam滅菌に使用できます。
- 小さいピンホールや破れが簡単に目視可能
- 湿気、乾燥による伸び、縮みがない

非石油製品です
木製バルブから作られた人体に優しいセルローズ製品です。皮膚過敏症の方が触られても大丈夫です。

シュアチェック・ストリップス

- 滅菌バッグ、滅菌ロール、紙製滅菌バッグ、CSR滅菌ラップ用Class4インジケーターです。
- 時間、温度、高圧蒸気の状態を確認後にインジケーター✓印が黒色に変化します。
- OSHA, CDC滅菌モニタリングガイドラインに合致しています。
- 簡便な滅菌完了確認ストリップスです。

サイズ	入り数	製品コード	
30 x 30 cm	100イリ	SW12	価格: ¥2,100
38 x 38 cm	100イリ	SW15	価格: ¥3,300
61 x 61 cm	100イリ	SW24	価格: ¥7,500



スチームインジケーターテープ

インジケーターは滅菌バッグを保護しながら処理されたアイテムを即座に識別します。科学指示薬線は蒸気滅菌プロセスにさらされると、ペーパークラウドブラウン/ブラックへの視覚的な色の変化を示します。

- 色変化インジケーターは滅菌プロセスへの暴露を検証します。
- テープは60ヤードに個別にパッケージ化されており、複数の幅で利用できます。
- 使い捨てCSR滅菌ラップ、滅菌バッグ、チューブに使用する天然色のクレープ紙で作られたインジケーターテープで、天然ゴムラテックス、鉛や溶剤を使用していません。

サイズ	製品コード	
1 ロール 3/4in x 60yd / 18mm x 55m	STLF18MM	価格: ¥1,500



IMAGING COMFORT


快適クッション

Crosstexは、フィルム/デジタル・レントゲン撮影作業中に発生する感染を予防し、患者さんの不快感を和らげる、多種多様なイメージング・快適クッションを取り揃えています。



エッジ・イーズ

- X線フィルムやセンサーのエッジからの患者さんに与える不快感を和らげます。
- 患者さんが強く噛まれても、精密なX線投影結果が得られます。
- フィルムポケット、フォトプレート、デジタルセンサースリーブに簡単に取り付けられます。

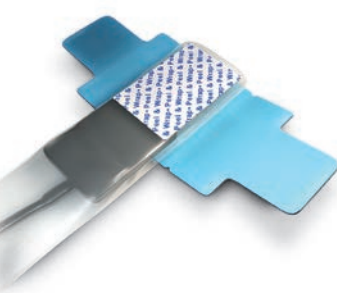

バイトウィング・イーズ

- 縦き目なし透明バリアスリーブとクッションが一体になっています。センサーがぴったり入り、バイトタブを作れるホルダー付きです。
- センサーのポジショニングが簡単で、精密な映像が得られます。
- RinnタイプXCPフィルムホルダーにも使用が可能です。

サイズ・カラー	入り数	製品コード	
Lラージ ブルー (ロングエッジSize 2フィルム/センサー対応)	300 /箱	BWEEB	価格: ¥11,000



サイズ・カラー	入り数	製品コード	
Sスモール ブルー (Size 0-1センサー対応)	50 /箱	BWES	価格: ¥7,600



ABOUT CROSSTEX

60年以上にわたりCrosstexは革新的な感染予防製品を考案、製造することにより、医療分野に貢献してきました。そして今、最も高品質な感染予防製品を製造できる施設、迅速な流通基地から、全世界に製品を供給させて頂いています。Crosstexは、米国でこの製品の大部分を製造することを誇りに思っています。



Crosstexが目指すものは

継続的にユニークで革新的な新製品の開発に努めることが、私たちの医療ミッションの基礎となるものです。私たちはより優れた感染管理、予防と安全のためのソリューションを提供する世界的なリーディング・メーカーとして、医療社会に奉仕できることを誇りに思っています。

シンボルマークについて

	100%品質保証		CE指令の必須要件に準拠する製品
	特別なユニーク製品		100%ラテックスフリー (ゴム・ラテックスを使用していない) 製品
	生分解性のある環境に優しい製品		再使用禁止製品
	米国内製造品		100%グルテンを含まない製品

発売元 SD サンデンタル株式会社

〈本 社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
 〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
 〈福岡営業所〉 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

[サンデンタルホームページ](http://www.sundental.jp)

<http://www.sundental.jp>

※掲載商品の価格は小売価格で2023年4月現在のものです。仕様及び外観は、製品改良の為、予告なく変更することがあります。



クロステックス総合カタログ

INFECTION PREVENTION CATALOG



PROTECTS



WHY CROSSTEX®?

安全確保と快適な装着感を追及し続けています!

クロステックスは、治療環境の違いによるあらゆる感染リスクに対応し、また快適な装着感を得られる多様なマスクを紹介しています。

ASTM (アメリカ材料試験協会) 規格レベル 1 [基本レベル感染防御]、レベル 2 [中レベル感染防御]、レベル 3 [高レベル感染防御] に加えて、BFE [バクテリア遮断率]、PFE [微粒子遮断率] レベルに応じてマスクを選択可能です。



SECURE FIT Technology セキュア・フィットテクノロジー

優れた装着感
優れた捕集率
優れた防御性

- ▶ アルミ製ノーズ(鼻上部)ピース&チン(顎部)ピースでマスクはカスタムメイドのように、あらゆるフェイスライン・サイズにピッタリフィットします。
- ▶ マスク上部/下部/両サイドの隙間が完全に封鎖されます。



Crosstex は、MaskEnomics® 評価システムを用いて、選択過程を簡単にし、全ての Crosstex 製フェイスマスク捕集率のレベルに応じて分類することによって、意思決定の手助けをする作りになっています。用途に応じて適した捕集率レベルを見つけるために、表示されているシンボルに目を向けてみてください。

Crosstex フェイスマスク 特長一覧表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ウルトラ・センシティブ・イアーループ・セキュアフィット	●	●					●	●	●				●
ウルトラ・センシティブ・イアーループ	●	●					●	●	●				
ウルトラ・ノーフォグ・イアーループ	●	●		●			●	●	●				
ウルトラ・センシティブ・バイオセーフ・イアーループ	●	●					●	●	●				●
プロシーデュラル・イアーループ	●	●					●	●	●				
アイソフルード・イアーループ・セキュアフィット	●	●					●	●	●				●
アイソフルード・イアーループ	●	●					●	●	●				

ASTM レベル 3

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、通常より多い治療環境下でご使用ください。



ウルトラ・センシティブ・イアーループ・セキュアフィット (皮膚過敏症対応)
 ・BFE = 99.9% @3μ
 ・PFE = 99.8% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製チンピース内蔵
 ・内面素材: 白色低刺激性、セルロース被膜
 ・内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
 ・インク、化学物質染料等 不使用
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 品番: GCFCXSF (ホワイト) 価格: ¥3,500 / 50枚



ウルトラ・センシティブ・イアーループ (皮膚過敏症対応)
 ・BFE = 99.9% @3μ
 ・PFE = 99.8% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 ・内面素材: 白色低刺激性、セルロース被膜
 ・内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
 ・インク、化学物質染料等 不使用
 品番: GCFCXS (ホワイト) 価格: ¥3,200 / 50枚



ウルトラ・ノーフォグ・イアーループ (メガネ曇り止め機能付)
 ・BFE = 99.9% @3μ
 ・PFE = 99.8% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 ・内面素材: 白色高撥水性
 品番: GCFCX (ブルー) 価格: ¥2,800 / 40枚



ウルトラ・センシティブ・バイオセーフ・イアーループ
 ・BFE = 99.9% @3μ
 ・PFE = 99.8% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 ・内面素材: 白色低刺激性、セルロース被膜
 ・抗菌材 BIOSAFE® 処理
 品番: GCFCXSBS (ホワイト) 価格: ¥2,500 / 40枚



ASTM レベル 2

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、中程度の治療環境下でご使用ください。



プロシーデュラル・イアーループ
 ・BFE = 99.9% @3μ
 ・PFE = 99.7% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 ・内面素材: 白色高撥水性
 品番: GCPBL (ブルー) / GCPPK (ピンク) 価格: ¥1,700 / 50枚

ASTM レベル 1

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が少ない治療環境下でご使用ください。



アイソフルード・イアーループ・セキュアフィット
 ・BFE = 99.1% @3μ
 ・PFE = 98.9% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製チンピース内蔵
 ・内面素材: 白色ティッシュ
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 品番: GCIBLSF (ブルー) / GCIPKF (ピンク) 価格: ¥1,700 / 50枚



アイソフルード・イアーループ
 ・BFE = 99.1% @3μ
 ・PFE = 98.9% @0.1μ
 ・高撥水性外面素材
 ・アルミニウム製ロングノーズピース
 ・内面素材: 白色ティッシュ
 品番: GCIBL (ブルー) / GCIPK (ピンク) 価格: ¥1,600 / 50枚



- A** アルミニウム製ロングノーズピース: 長く、丈夫なノーズピースにより、マスクの密着度を最大限に高める
- B** マスク外面層素材 / 高撥水性素材: バクテリアを含んだ水溶液を最大限に撥水
- C** マスク外面層素材 / フェイシャル・ティッシュ: 柔らかく、無臭のフェイシャル・ティッシュを使用
- D** 蒸気バリア: マスク外面上部の薄い不織布で、マスク外面層に付着した水溶液が蒸気になりメガネが曇るのを防ぐ


- E** フォグ・フリーストリップ: マスク内の呼吸を吸収し、メガネ等の曇りを防ぐ。柔らかい素材のクッションで鼻周りの圧迫感を軽減し、マスクの密着度を高める
- F** 優しいイアーループ (耳かけ紐): ゴム未使用の耳かけ紐 (ラテックス・フリー)。装着部は皮膚への刺激を避ける為、マスク外側に付けている
- G** 超音波接着: 接着不良が生じにくい超音波接着方式で各層を接着。縫合ミシン目穴や接着剤からの刺激は一切ない
- H** 高レベルのフィルター (ろ過) 層: ASTM規格のフィルター (ろ過) 能力と通気性能
- I** 皮膚過敏症に優しいセルロース被膜: セルロース被膜をカバーしており皮膚の乾燥を防ぐ。皮膚過敏症の方が皮膚に刺激を感じることは殆どない仕様
- J** フェイシャル・ティッシュ層: 白色で柔らかいフェイシャル・ティッシュ素材
- K** 不織布内面層: 白色の撥水性の高い素材を使用

- L** セキュア・フィットアルミニウム製チンピース: マスク下部に施されたチンピースは上下、左右からの微粒子の侵入を防止
- M** 抗菌材 BIOSAFE® 処理: 使用済みマスク表面に付着した有害な微生物を効果的に消滅させ、マスク本体に触れることが原因となる交差汚染を減少させる

全てのCrosstexフェイスマスクには、ラテックスは使用されていません (ラテックスフリー)。再使用しないで下さい。

患者用ディスポエロン

Crosstexの歴史は患者用エプロンから始まりました。Crosstexは患者用エプロンを製造、販売した最初の会社です。そして、50年以上に渡りCrosstexの患者用エプロンは、世界の患者用エプロン品質の基準になっています。

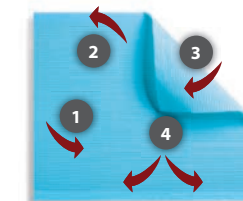

Crosstexの患者用エプロンの特長

1. しばしば模倣(コピー)されますが、決して同品質のものを製造することは出来ません。Crosstexの押し型は水溶液がまっすぐ下に流れ落ちないように工夫されていて、患者さんの衣服を濡らすことが殆どありません。
2. エプロン上部の特殊な (密度の高い) 補強押し型はエプロン強度を増し、クリップを取りつけ易くなっています。
3. ペーパー素材とポリ素材は極度に密着度を高め、ペーパーとポリが剥がれないように工夫されています。
4. 下部の特殊な (密度の高い) 補強押し型はエプロン強度を増し、流れ落ちる水溶液を止める役割もあります。クリップを取りつける時に破れないようになっています。



	サイズ	FOLD パターン C-Crosstex V-Vantage	押し型 パターン	製品コード カラー			
ペーパー2層 + ポリ1層							
エコバックエプロン/ECONOBACK® 500 / ケース	48 X 33 cm	C	HORIZONTAL 水平押し型	WEJEBL ブルー WEJELV ラベンダー	WEJEGR グリーン	WEJEYE イエロー	価格: ¥5,500
ウルトラガード/ULTRAGARD® 500 / ケース	48 X 41cm	C	HORIZONTAL 水平押し型	WUJUBL ブルー	WUJUWH ホワイト	WUJUYE イエロー	価格: ¥7,400



OPERATORY PROTECTION

バリア・フィルム

バリア・フィルム



- ・取りつけ、取り外し作業が簡単にできるよう、ロールの両サイド約5mmは不粘着化 (フィンガー・リフトエッジ)
- ・オートクレープ、ケミクレープ、ガス滅菌の施しづらい器具、箇所を感染から保護
- ・グローブを装着したままでも手軽に取りつけ、取り外し可能



サイズ	数量	製品コード / カラー		価格
10 x 15 cm / シート	1200シート/ロール	BFBL ブルー	BFCL クリア (透明)	¥4,300

トレカカバー



ブラケット・トレカカバー

- ・特殊なヘビーウェイト・ペーパーで作られています。
- ・水分が流れにくくなっています。
- ・水分の浸透性は極めて低いです。



ブラケット・トレカカバー	サイズ	製品コード / カラー		価格
SIZE B RITTERタイプ 1,000 / 箱	22 x 31 cm	FBBL ブルー	FBWH ホワイト	¥6,100