

exocadは、歯科のあらゆる専門家のための強力なCADソリューション

10+

年以上の成功実績

150

か国以上のユーザー


45,000

を超える導入数

歯科用CADソフトウェアとしての実績・世界各国での利用者数・多くの導入事例

修復歯科は芸術であり科学です

迅速な大量生産から複雑なカスタマイズソリューションまで、**DentalCAD®**はすべてを可能にします。

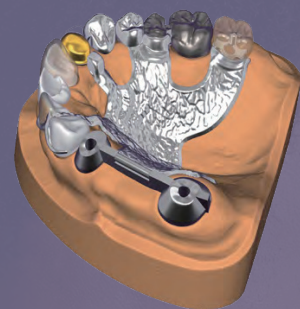


用途の広いアプリケーション

クラウン、ブリッジ、コーピング、ベニア、インレー、アンレー、ボンティック、プロビジョナル、デンチャーなど、幅広い歯科修復物を設計



信頼性の高いコンピューティング

安定して作動し、大量のデータも高速で処理できるソフトウェアで作業が快適に

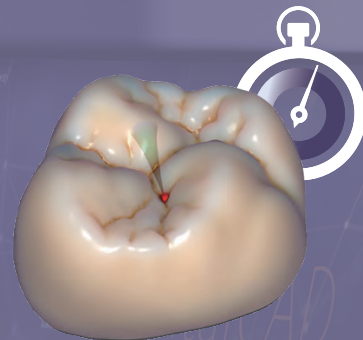

お客様のニーズに適応

DentalCAD®は、個人のニーズおよびワークフローに容易に適応できます

OFFICIAL
RESELLER

exocad

CAD用ドングル

CAD ソフトは、標準機能のみの「exocad 歯科用 CAD ソフト」とあらかじめアドオンモジュールがセットになったドングルがございます。詳しくは裏面をご覧ください。

exocad 歯科用CADソフト

- exocad アドバンスラボドングル
- exocad インプラントラボドングル
- exocad 究極のラボドングル

推奨PCスペック要件

CPU: Intel Core-i9 11900k / AMD Ryzen 9 5900X
RAM: 32GB DDR4 non ECC
グラフィックカード: Nvidia RTX 2060 (6GB GDDR6) or RTX 3070
AMD Radeon RX 5600 XT or 6700XT (6GB GDDR6)
解像度: WQHD (2560x1440)、推奨: UHD (3840x2160)
PSU (電源ユニット): 750W以上

アドオンモジュール【別売】

インプラントモジュール
バーモジュール
モデルクリエイター
バ이트スプリントモジュール
プロビジョナルモジュール
パーシャルCAD
フルデンチャーモジュール
トゥルースマイル
バーチャルアーティキュレーター
ジョーモーションインポート
DICOMビューワー
スマイルクリエイター
トゥースライブラリ

● PCは別売です。専用PCの選定のお手伝いや販売も可能です。お気軽にお問い合わせください。● CADソフトやアドオンモジュールの価格は弊社までお問い合わせください。● 仕様及び外観は、製品改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。● 製造元: exocad GmbH (ドイツ連邦共和国)

SD サンデンタル株式会社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-8-9

商品に関するお問い合わせ: 月~金 9:00~17:00
大阪 06-6245-0950 東京 03-3836-9347 福岡 092-482-2318



サンデンタルホームページ
<http://www.sundental.jp>



@sundentaljapan

2304G02



DentalCAD®

BOOST YOUR CAD DESIGN PRODUCTIVITY


飛躍的にCADデザインの生産性を向上

exocad

SD SUNDENTAL CO.,LTD.

Standard feature:標準機能

DentalCAD®の直観的なユーザー・インターフェース、広範囲な機能および様々な歯牙・材料のライブラリを備えた高速でフレキシブルなベーシックドングル。審美および機能歯科の修復デザインをシンプルに。

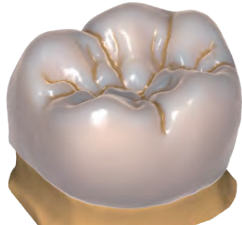


アナトミッククラウン

少ないステップで、美しく機能的なクラウンを設計。複数の歯牙ライブラリをあらかじめ登録



ブリッジ

インレーブリッジからフルマウスブリッジまでのあらゆるフレームワーク設計

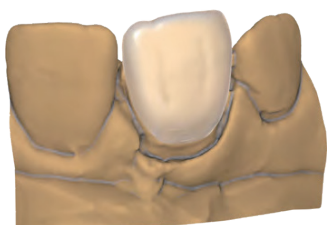

ベニア

審美性に優れたベニア設計




テレスコープクラウン

柔軟にテレスコープクラウンの設計




カットバック/シンプルコーピング

フルアナトミーに着想を得ながら、カットバックオプションを駆使して最適なコーピングを実現

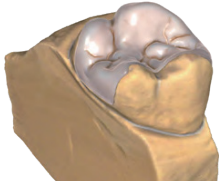

インレー/アンレー

美しく自然なインレー/アンレー補綴物を設計

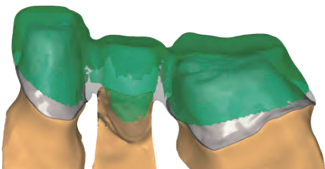

ワックスアップ

アナログワックスアップのスキャン〈Wスキャン〉や修正、デジタルワックスアップの設計




アタッチメント

豊富なライブラリを活用し、デザインにアタッチメント形状の設計を追加・削除することが可能


DentalCAD'sのアドオンモジュール

DentalCAD®なら、可能性は無限大です！DentalCAD®のアドオン・モジュールがあれば、お客様のニーズに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。

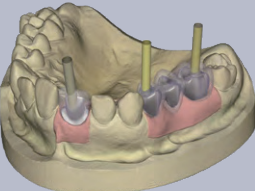


インプラントモジュール

アバットメントおよびスクリュー固定式補綴物の設計

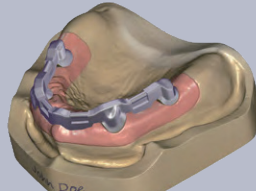


バーモジュール

簡単なバーから高度なバーまで設計。複雑なデザインにも対応

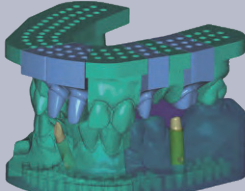


モデルクリエーター

印象データから3Dプリンター等で造形するための物理的モデルの設計、ガム模型の設計

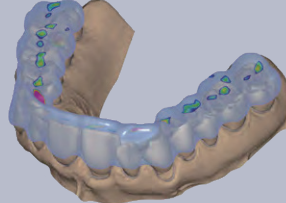


バイトスプリントモジュール

ナイトガードやスプリントの設計

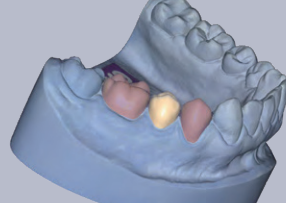

プロビジョナルモジュール

術前スキャンに基づくテンポラリークラウン・ブリッジの設計

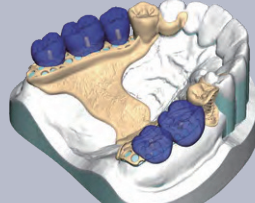


パーシャルCAD

パーシャルデンチャーのフレームワークの設計



フルデンチャーモジュール

フルデンチャーの設計

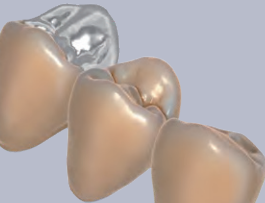


Tru ツールズスマイルモジュール

より美しく、よりリアルに補綴物を描画



バーチャルアーティキュレーター

正確な咬合位置を取り込み、顎の動きをシュミレーションし、動的な咬合を解析可能

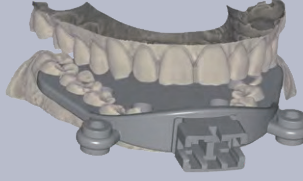


ジョーモーションインポート

デバイスから顎の測定値をインポート可能（バーチャルアーティキュレーターモジュールが必須）




DICOMビューアー

CTからの3Dボクセルデータを設計中に可視化

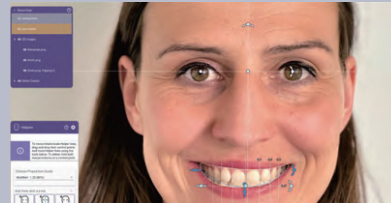

スマイルクリエーター

次世代のスマイルデザインで、2Dおよび3Dで視覚化

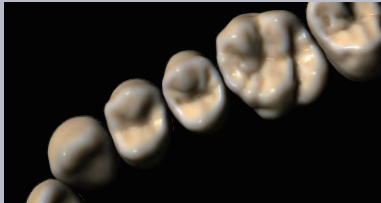

トゥースライブラリ

美しく自然な歯牙データが充実したライブラリ（上顎前歯61セット、下顎前歯19セット、上顎臼歯19セット、下顎臼歯19セット）

セットで購入可能なドングル種類:

- アドバンスラボドングル
- インプラントラボドングル
- 究極のラボドングル

exocad歯科用CADソフトのライセンス

弊社では、ご購入後の費用が掛からないバーベチュアル〈永続〉ライセンス版のexocad歯科用CADソフト及び、アドバンスラボドングル、インプラントラボドングル、究極のラボドングルを主に販売しております。アクティベート日から一年以上経過した後に最新バージョンにアップデートも可能ですが、右表の通り、追加費用が掛かります。常に最新版exocadをご使用になりたい場合は、フレックスライセンスをご購入ください。

名称	バーベチュアルライセンス	フレックスライセンス
意味	一度の支払いで永続的に使用できるライセンス	一年毎に更新費用は必要だが、常に最新バージョンが使用可能
メリット	一年毎の更新費用がない	最新バージョンが常に使用可能
デメリット	アクティベート日から一年以上経ち最新バージョンを使用したい場合は、「リフレッシュ費用」と「ドングルアップデート費用」が必要	一年毎に更新費用が発生



exocad歯科用CADソフトやアドオンモジュールについての詳しい情報は、左のQRコードをスキャンしてください。