


ハトー スコッチブライト™

繊細な解剖学的性状を
損なうことなく研磨可能！

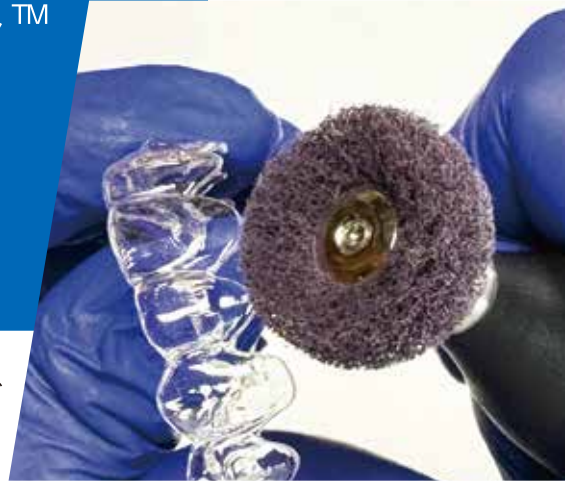

ハトー スコッチブライト™ で義歯床を研磨すると、

- 繊細な解剖学的性状を損なわず研磨可能！
- 低速（約 5,000rpm）& 軽い圧の研磨で、
摩擦による発熱を抑制

必要な研磨仕上度合いに応じて、粗目・中目・細目の3種類から選択可能

原寸大



ハード
250-25HP D1



ミディアム
251-25HP D2



ソフト
255-25HP D3

使用可能材料

アクリル義歯	PMMA
スプリント材料	マウスガード
サージカルガイド	ハイブリッドレジン
チタンを含む金属	アライナー

特徴

柔軟性があり、表面性状を崩さずに研磨可能
角がなく、性状を崩さない
研磨剤含有
空気層を含みながら研磨し発熱を抑制
紙やすりをブラシ形態に

研磨部直径 25mm / マンドレル直径 2.34mm / 入数 12本 / 価格 ¥3,500 [各サイズ]

販売名 ハトー スコッチブライト / 研磨部材質 スコッチ・ブライト™ / 区分 一般医療機器 / 届出番号 27B2X00041000195