

研削用ハンドピース

ハトー ブラシ(HP用) 光沢/最終光沢研磨時に使用するバフ。用途に合わせて使い分けてください。

品番	500-22HP W5	520-22HP W7	870-22HP W8	150-22HP W1	160-22HP W2	161-22HP W3	162-22HP W4	154-22HP W6
研削用途	貴金属・合金	貴金属・レジン	合金・チタン	貴金属・レジン	貴金属	セラミック・貴金属・レジン	合金	チタン
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	鹿皮	マイクロファイバー	鹿皮(滑らかな)	綿糸バフ	モスリン	フランネル	フェルト	綿糸バフ(細目)
径(mm)	22	22	22	22	22	22	22	22
価格/入数	¥3,800/12本	¥3,500/12本	¥4,900/12本	¥4,000/12本	¥3,500/12本	¥3,500/12本	¥3,800/12本	¥6,500/12本

ハトーハプラスブラシ

弾性ポリアミドファイバーに均一に砥粒を混ぜたブラシを使用しており、研磨剤は必要ありません。高い耐久性を持っています。

品番	400-19HP T1	400-22HP T2	410-19HP T3	410-22HP T4	420-19HP T5
材質	酸化アルミニウム	酸化アルミニウム	炭化ケイ素	炭化ケイ素	炭化ケイ素
粗さ	ファイン	ファイン	ミディアム	ミディアム	コース
径(mm)	19	22	19	22	19
価格/入数	¥6,000/4本	¥6,000/4本	¥6,000/4本	¥6,000/4本	¥6,000/4本

セラミック研削用ハンドピース

ハトー ダイヤストーン

ダイヤモンド粒子をハイブリッド結合させたポイント/ディスクです。僅かな圧でジルコニア・ポーセレン・チタン・金属等の形態修正・調整ができます。また高寿命で幅広い用途に使用できます。



品番	377-4HP	372-6HP	372-6HP	374-15HP	375-22HP	375-22R	367-4HP	362-4HP
硬さ	細目/中目	細目/中目	細目	細目	細目	極細目	極細目	極細目
径(mm)	4	6	15	22	22	4	4	4
研削部厚さ(mm)	11	12	3	3	3	11	11	11
価格/入数	¥3,500/本	¥3,800/本	¥4,700/本	¥5,600/本	¥5,300/本	¥4,500/本	¥4,500/本	¥4,500/本

ポーセレンブラシ

ハトー ポーセレンブラシ MZ ナイロン



高品質ナイロン毛: 異なる太さの化学繊維(ナイロン)と非常に細い毛先からなる高品質ポーセレンブラシ コシの強さと築盛の際の筆の動きは天然毛ポーセレンブラシをモデルにしており、尚且つ、穂先がスツツと尖りまわりが良い

ペインティングブラシ	品番	ブラシサイズ	全長	価格
	MZ00	00	16cm	¥1,500
	MZ0	0	16cm	¥1,500
	MZ2	2	16.5cm	¥1,600

セラミック築盛用ブラシ	品番	ブラシサイズ	全長	価格
	MZ4	4	16.5mm	¥2,100
	MZ6	6	17mm	¥2,800
	MZ8	8	17mm	¥4,800

オバーク用ブラシ	品番	ブラシサイズ	全長	価格
	SP02	2	16mm	¥2,000

ハトー ポーセレンブラシ TK コリンスキー



高品質コリンスキー採用: 穂先のまとまりが良い毛先と吸水性に優れた高品質コリンスキー天然毛を使用した高品質ポーセレンブラシ 形状保持が非常に良く、使用中に穂先がバラけにくく、多量の陶材も築盛しやすい

ペインティングブラシ	品番	ブラシサイズ	全長	価格
	TK00	00	18cm	¥2,400
	TK0	0	18cm	¥2,400
	TK2	2	18.5cm	¥2,500

セラミック築盛用ブラシ	品番	ブラシサイズ	全長	価格
	TK4	4	19mm	¥4,200
	TK6	6	19mm	¥5,800
	TK8	8	19.5mm	¥8,400

研磨用ハンドピース

ハトー ハプラスディスク PRO [HP用]

- 柔軟な素材のため複雑な凹凸部にも入り込み効果的に研磨
 - 砥粒含有のため、コンパウンドなどを併用する必要がない
 - 砥粒の作用によりスピーディな作業ができ、時間を短縮可能
 - 研磨度がほとんど出ないのを、チェアサイドでも使用可能
- 研磨部材質 ポリアミドポリシリコキサン
研 磨 用 途 コバルトクロム合金の研磨
レジン
軟性レジン・熱可塑性レジン
PMMA(アクリル樹脂)の研磨
サージカルガイド・ステート等の研磨

品番	901-25(3)HP	902-25(3)HP	903-25(3)HP
コース (P80)	スタンダード (P220)	ファイン (P400)	
粗さ	25mm	25mm	25mm
径	25mm	25mm	25mm
価格/入数	¥1,500/1本	¥1,500/1本	¥1,500/1本

チェアサイドでの義歯調整に使えるHP型ブラシ

- オートクレープ滅菌可能
 - 柔軟性のあるブラシで、研磨による形態変形を起こしにくい
 - カーバイドバー等での調整後、3ステップでツヤ出し可能
- 研磨部材質 ポリアミドポリシリコキサン
研 磨 用 途 チェアサイドでの義歯調整後の中研磨～光沢研磨
※各1本をセットにしたお得なセット「ハトー ハプラスディスクPRO チェアサイド義歯研磨キット」もあります。詳細は本誌中面をご覧ください。



品番	905.1-14PP	903.2-14PP	904.3-14PP
粗さ	ミディアム (P120)	ファイン (P400)	スーパーファイン (P800)
径	14mm	14mm	14mm
価格/入数	¥1,600/1本	¥1,600/1本	¥1,600/1本

ハトー スコッチブライト

- サンドペーパーコーンの代わりとして使用すると:
☆ブラシを擦りつけても熱が発生しづらい
☆表面形態を崩さずに研磨が可能
 - ブラシに研磨剤が混入されており、コンパウンドを擦り付ける等の手間が省けます
 - 口蓋部等の面が広く細かい凹凸のある箇所研磨に適しています
- 研磨部材質 スコッチブライト
研 磨 用 途 レジン・熱可塑性レジン・ナイトガード材料等

品番	250-25HP D1	251-25HP D2	255-25HP D3
粗さ	ハード	ミディアム	ソフト
径	25mm	25mm	25mm
価格/入数	¥3,500/12本	¥3,500/12本	¥3,500/12本

ハトーフィックス

#80(粗目) #240(細目)


コバルトクロム合金、チタン等の粗研磨・中研磨用ポイント。
高速回転(15,000RPM)で研磨物に軽く押し当てただけで、研磨面を梨地様にし、最終光沢研磨工程をラクにします。
○高研磨性と高耐久性を両立
○研磨後のキスが少なく、のちの研磨がラク
※#240(細目)はマンドレルに赤リングを装着
研磨部材質 コランダム(酸化アルミニウム)
ニトリルゴム

品番	#80 204-20HP	#80 202-8HP	#80 206-8HP
粗さ	#240 224-20HP	#240 222-8HP	#240 226-8HP
径	20mm	8mm	8mm
入数	4本/1本	4本/1本	4本/1本
価格(#80)	¥2,900/¥900	¥5,000/¥1,600	¥5,000/¥1,600
価格(#240)	¥3,300/¥1,100	¥6,000/¥1,900	¥6,000/¥1,900

歯科技工用関連製品

ハトー ペンシルブラシ 692-00

カーバイドバー等の目詰まり、技工物の細かい汚れ除去にご使用ください。ブラシ部分が短くなれば、尻軸部を回すとブラシが出ます。
価 格 ¥1,700/1本

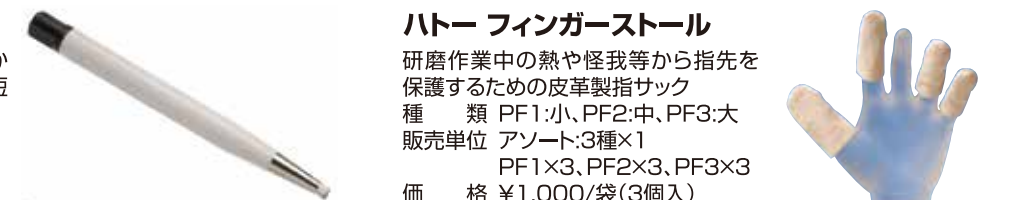

ハトー フィンガーストール

研磨作業中の熱や怪我等から指先を保護するための皮革製指サック
種 類 PF1:小、PF2:中、PF3:大
販売単位 アソート:3種×1
PF1×3、PF2×3、PF3×3
価 格 ¥1,000/袋(3個入り)



ハトー製品カタログ HATHO BRUSH PRODUCT CATALOG vol.2.10



純チタン・チタン用鏡面研磨

3D プリント レジンの最終光沢研磨
アクリルデンチャー (PMMA)・軟性レジン
チタン・貴金属・非貴金属の鏡面研磨

① 研磨する箇所に合わせてブラシを選択
② 選択したブラシをマイクロモーターに取り付け、低回転で回転させたブラシにポリッシングペーストを軽く押し当て着させ、4,000～7,000回転の低回転で軽く押し当てて研磨。鏡面研磨の準備が完了!

セット内容
①ハトー ポリスター ポリッシングペースト レッド レギュラー^{※1}×1
②ハトー TOROブラシ TORO #11^{※2}×1
③ハトーブラシ(HP用) 174-21HP(F6)^{※2}×1
④ハトーブラシ(HP用) 100-10PP(R22)^{※2}×1
単品販売 [レギュラーまたはラージサイズ^{※1}]、[12本]^{※2}もございませ

販売名:ハトー ミニボル 34 届出番号:27B2X00041000228 一般医療機器

歯面・裂溝・咬合面研磨用

① 研磨部にこびり付かない・固まらない様に少量のみ塗布するのが重要!

使用方法
重要:キスがスムーズ(梨地のような)研磨面を確認する
① 研磨対象面にポリスター エマルジョンを少量塗布し、指で伸ばす
② 選択したブラシをマイクロモーターに取り付け、10,000回転で研磨を行う
キズのない艶やかな研磨面が完成!

セット内容
①ハトーポリスター エマルジョン 50ml^{※1}×1
②ハトーブラシ (HP用) 150-22HP(W1)^{※2}×2
単品販売 [50・125ml^{※1}]、[12本]^{※2}もございませ

販売名:ハトー ミニボル 12 届出番号:27B2X00041000227 一般医療機器

MiniPol 34	ハトー ミニボル 34	¥2,100
MiniPol 12	ハトー ミニボル 12	¥1,800

研磨用ハンドピース

ハトー ブラシ(HP用) 10,000

品番	100-23HP R1	102-16HP R2	102-19HP R3	120-s5HP R5	120-19HP R6	121-23HP R7	122-16HP R8	193-16HP R9
研削用途	金属・レジン	貴金属	貴金属	金属・レジン	金属・レジン	合金	貴金属・合金	金合金
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ハード	ハード	ハード	ハード	ハード
材質	山羊毛	山羊毛	山羊毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	ワイヤー(φ0.06)
径	23mm	16mm	19mm	8mm	19mm	23mm	16mm	16mm
価格/入数	¥3,500/12本	¥2,200/12本	¥2,200/12本	¥3,500/12本	¥2,200/12本	¥3,000/12本	¥2,200/12本	¥3,800/12本

品番	193-19HP R10	122-19HP R12	193-p8HP R13	GEZA100HP R15	GEZA121HP R17	102/520-22HP R21	100-10PP R22
研削用途	金合金	貴金属・合金	金合金	金属・レジン	金属・レジン	チタン	レジン・セラミック・チタン
硬さ	ミディアム	ハード	ミディアム	ソフト	ハード	ソフト	ソフト
材質	ワイヤー(φ0.06)	豚毛	ワイヤー	山羊毛	豚毛	山羊毛+マイクロファイバ(レザ)	山羊毛
径	19mm	19mm	5mm	22mm	22mm	22mm	10mm
価格/入数	¥3,800/12本	¥2,200/12本	¥4,000/12本	¥3,000/12本	¥3,000/12本	¥4,900/12本	¥4,000/12本

ハトー アストロブラシ 10,000

星型研磨ブラシ。咬合面・細かい連結部・隣接歯間部などの凹凸部に入り込みやすく、また歯面の研磨も行えるので、オールマイティに使用できます。
他のハトー社研磨用ハンドピースブラシに比べて毛量が10%多く、研磨効率UP!
用途 #9-100 アクリルレジン・ゴールド・コンポジットレジン
#9-114 さまざまなメタルの研磨



品番	#9-100	#9-114
硬さ	ソフト	ミディアム
材質	山羊毛	馬毛
径	22mm	22mm
価格/入数	¥3,800/12本	¥3,800/12本

ハトー TOROブラシ 10,000

用途 レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属・硬質メタル等の最終仕上げ研磨
他のハトー社研磨用ハンドピースブラシに比べて毛量が10%多く、研磨効率UP!



品番	TORO #9	TORO #11
硬さ	ソフト	ソフト
材質	山羊毛	山羊毛
径	14.5mm	17.5mm
価格/入数	¥3,800/12本	¥3,800/12本

ハトー ブラシ(HP用) 10,000

コンパウンドの保持力の高いフェルトポリッシャー・ハトー ポリスター タイヤモックペースト(別売)と共に使用し、セラミックの研磨にも最適です。
材質 フェルト

品番	173-8HP F1	173-11HP F2	173-6HP F3	172-8HP F4	175-21HP F5	174-21HP F6
径/厚(mm)	8/20	11/24	6/20	8/16	21/5	21/4
価格/入数	¥3,700/12本	¥4,200/12本	¥3,300/12本	¥3,100/12本	¥3,200/12本	¥3,200/12本

レースブラシ

金風床の研磨に効果的

品番	121-42 L1	121-48 L1-1	121-36 L1-2	100-48 L2	682-51 L3	1140 L20	1145 L4	1144 L18	1250 L5	1245 L17	1270 L6	1355 L7	1370 L19	146-4 L15	148 L8
ブラシ形状	ストレート	ストレート	テーパー	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	ストレート	ストレート
列数	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4
硬さ	ミディアム	ソフト	ハード	ソフト	ハード	ハード	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ハード	ハード	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
材質	豚毛	豚毛	豚毛	山羊毛	ステンレス	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛	豚毛
径・内/外(mm)	22/42	22/48	22/36	22/48	22/51	25/40	25/45	25/44	25/50	25/45	50/70	40/60	40/70	40/60	40/80
価格	¥400/個	¥400/個	¥500/個	¥500/個	¥3,500/個	¥400/個	¥400/個	¥400/個	¥400/個	¥400/個	¥600/個	¥500/個	¥700/個	¥1,100/個	¥900/個

品番	1480 L9	100-80 L10	121-48VL L16VL	5480 L11	6380 L12	6480 L13	7380 L14	8277 L29	9280 L21	9255 L21-2	4280 L33	POKAL L30
ブラシ形状	テーパー	ストレート	ストレート	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列数	4	4	3	7	5	7	5	5	3	3	4	1
硬さ	ミディアム	ソフト	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ハード
材質	豚毛	山羊毛	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛4列+布3列	豚毛3列+フェルト2列	豚毛4列+フェルト3列	豚毛3列+鹿皮2列	豚毛3列+綿モスリン2枚/2列	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛2列+スコッチ1列	豚毛2列+スコッチ2列	豚毛
径・内/外(mm)	40/80	40/80	22/48	40/80	40/80	40/80	40/80	35/80	40/80	25/55	40/80	14/35
価格	¥800/個	¥1,200/個	¥600/個	¥1,400/個	¥1,400/個	¥1,600/個	¥1,500/個	¥1,500/個	¥1,100/個	¥1,000/個	¥1,400/個	¥2,000/個

品番	520-100/7 L23	500-80LE L22	520-90LE L24	870-100/14 L31	500-80LE L22	862-100/15 L28	156-80HS L25	869-100/14 L32	156-80H L26	152-80BW L27
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列数	7	4	4	14	14	15	37mm	23mm	18mm	18mm
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ミディアム	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	マイクロファイバー	鹿皮	マイクロファイバー	綿モスリン (片面シリコンコート)	綿モスリン (片面シリコンコート)	ゼタコットン (化学繊維)	綿糸パフ	綿糸パフ	綿糸パフ	綿糸パフ
径・内/外(mm)	40/100	40/80	40/90	40/100	40/100	40/100	40/80	40/80	40/80	40/80
価格	¥2,500/個	¥2,200/個	¥2,500/個	¥2,800/個	¥2,800/個	¥1,600/個	¥1,600/個	¥1,600/個	¥1,600/個	¥1,600/個

ハトミラバ

薄手で柔らかく織目が細かくて良質な綿モスリンを使用。軸部はレザーで補強しています。
○研磨剤が固着しづらい素材を使用
○ハードとソフト、2つの硬さ

品番	867 100x50HG	868 100x50HG	868 100x50H
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート
列数/厚さ(mm)	50/15	50/15	50/15
硬さ	ハード	ソフト	ソフト
材質	綿モスリン (トクモロコシエキ浸透済)	綿モスリン	綿モスリン
径・内/外(mm)	30/100	30/100	30/100
価格	¥600/個	¥600/個	¥600/個

ハトミラミニ

ミラバ アイエロと同材質のハンドピース版

品番	867-25gHP	867-25HP
研磨用途	光沢研磨	光沢研磨
硬さ	ハード	ハード
材質	綿モスリン	綿モスリン
径(mm)	25	25
価格/入数	¥2,800/12本	¥2,600/12本

ハトブラシ レース用 ハトジャンボホイール/スモールホイール

取り外し可能なリングにより、研磨ディスクを固定します。紐で固定するよりも強固に固定でき、尚かつ簡単にリングを取り外すことができます。

品番	160-110J J1-1 (160-80J J1-2)	162-110J J2-1 (162-80J J2-2)	500-110J J3-1 (500-80J J3-2)	253-110J J4-1 (253-80J J4-2)	520-110J J5-1 (520-80J J5-2)
ブラシ形状	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート	ストレート
列/厚み(mm)	30枚/18 (45枚/20)	6枚/18 (12枚/28)	6枚/18 (12枚/28)	2枚/18 (4枚/26)	6枚/16 (12枚/19)
硬さ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト
材質	綿モスリン	フェルト	鹿皮	スコッチセラミド [砥粒無]	マイクロファイバー
径・外(mm)	110 (80)	110 (80)	110 (80)	110 (80)	110 (80)
径・コア(mm)	90 (63)	90 (63)	90 (63)	90 (63)	90 (63)
価格/入数	¥2,200 (¥2,400)	¥2,200 (¥2,400)	¥3,800 (¥4,300)	¥2,800 (¥3,500)	¥3,200 (¥4,200)

研磨剤

ハトポリスター ポリッシングペースト

研磨を行う際が一番大切な点は、研磨対象物に対して最適なポリッシングコンパウンドを選択し、ステップbyステップで素早く効果的に研磨することです。
届出番号 27B2X00041000048

レジン	コンボジット	コバルトクロム	貴金属	非貴金属	セラミック	チタンアバットメント
レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100	レギュラー ¥1,100
ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200	ラージ ¥2,200

中研磨

ブラウンレギュラー ¥1,100	ラージ ¥2,200	リンディグレイレギュラー ¥1,100	ラージ ¥2,200
------------------	------------	---------------------	------------

貴金属の中研磨用

アクリル義歯とコンボジット、貴金属(18K)の中研磨用

仕上げ研磨

ホワイトレギュラー ¥1,100	ラージ ¥2,200
------------------	------------

白銀、非貴金属、コバルトクロム合金、軟性レジンの仕上げ研磨用

最終仕上げ研磨

グリーンレギュラー ¥1,100	ラージ ¥2,200	ブルーレギュラー ¥3,300	ラージ ¥6,600
------------------	------------	-----------------	------------

貴金属合金、コバルトクロム合金の最終仕上げ研磨用

ハイブリッドレジン、コンボジットレジンの仕上げ研磨用

レッドレギュラー ¥1,700	ラージ ¥3,300	ベージュレギュラー ¥1,100	ラージ ¥2,200	ローズレギュラー ¥3,500	ラージ ¥7,000
-----------------	------------	------------------	------------	-----------------	------------

金・白銀の最終仕上げ研磨用

チタン合金の仕上げ研磨用

アクリル義歯とコンボジットの最終仕上げ研磨用

14金、アクリル義歯、ハイブリッドレジン、コンボジットレジン、軟性レジンの最終仕上げ研磨用

ハト ポリスター エマルジョン

貴金属、非貴金属合金、コバルトクロム合金、チタン、コンボジット、歯科用セラミックの最終研磨用リキッド状研磨剤。研磨対象面に塗布して綿糸パフで研磨してください。
届出番号 27B2X00041000046
価格 ¥1,700/50ml

ハトポリスター ポリッシングクリーム

アクリル樹脂、軟性レジン、コンボジットレジン、貴金属の光沢研磨用クリーム状研磨剤。布パフ・フェルト・マイクロファイバー・レザー製ブラシと併用してください。
届出番号 27B2X00041000165
価格 ¥2,100/90g

ハトポリスター プロ ポリッシング ベースト ピンク

アクリル樹脂、軟性レジン、コンボジットレジンの最終光沢研磨用コンパウンド。既存のコンパウンドと比較しても素早くカンタンにハイグロスな光沢が得られます。綿糸パフと併用してください。
届出番号 27B2X00041000166
価格 ¥3,900/150g

ハト ポリスター ダイヤモンドペースト

3μmの天然ダイヤモンド砥粒配合の貴金属、非貴金属合金、コバルトクロム合金、チタン、コンボジット、歯科用セラミックの仕上げ研磨用。フェルト製ハンドピース等と併用してください。
届出番号 27B2X00041000047
価格 ¥5,200/4g

ハト ポリスター プロ ダイヤモンドペースト 8g

2μmの天然ダイヤモンド砥粒配合で、① ツヤ出しだけでなく若干の研磨能力により、微細な切削痕等のキス取りが可能に
② 研磨中中はペーストのローズ色が乗り、滑沢になると油分を含まない地色が現れる
③ ペーストをブラシに塗布する際、回転するブラシを押し付けても飛び散りにくい
④ 超薄型スライド式ケースで、容器を指で挟んで保持しながらの研磨も可能に
研磨用途 ジルコニア・ガラスセラミック・ポーセレン
ハイブリッドセラミックの最終光沢研磨

研磨砥粒 ダイヤモンド砥粒 [2μm]

届出番号 27B2X00041000175
価格/容量 ¥5,800/8g

ハト ブラシ (ハンドピース用) 100-10PP R22

咬合面や製溝部専用のブラシ。軸部が小さく細かい製溝部に入りやすいので、他のブラシより深部の研磨が可能に！

届出番号 27B2X00041000177

歯科用義歯研磨キット

ハト ハトラスディスク PRO チェアサイド義歯研磨キット

チェアサイドでの義歯の研磨にオススメ

- コンパウンド不要!チェアサイドを汚さない!!
- 滅菌可能!(耐熱温度134℃)
- 柔軟性のある樹脂製ブラシで、形態が変形しにくい!
- 風を巻き込む形状で研磨熱の発生を防ぐ!
- ブラシヘッド部のドット(●)でステップ順を表記(右写真) 3ステップで調整後の義歯のツヤ出しを行える!

Step1 中研磨	Step2 中光沢研磨	Step3 光沢研磨
品番 905,1-14PP	品番 903,2-14PP	品番 904,3-14PP
粗さ ミディアム(P120)	粗さ ファイン(P220)	粗さ スーパーファイン(P400)
径 14mm	径 14mm	径 14mm
単品価格/入数 ¥1,600/1本	単品価格/入数 ¥1,600/1本	単品価格/入数 ¥1,600/1本

セット内容 905,1-14PP×1
903,2-14PP×1
904,3-14PP×1
価格 ¥4,500/セット

※本品はマンデルタイプです。歯科用マイクロモーター等に装着してご使用ください
届出番号 27B2X00041000164

ハト アクリルセット2

ハト アクリルセットの進化版!

- ① より強力な中研磨用レースブラシ=作業時間の短縮!
- ② 砂研磨が不要なコンパウンド=作業環境を汚さない!
- ③ 光沢をより一層深めるための乳液状研磨剤をセットにし新発売!

セット内容 ハトブラシ レース用 4280 (L33)×2
ハトブラシ レース用 520-100/7 (L23)×1
ハトブラシ レース用 152-80BW (L27)×1
ハト ポリスター ポリッシングペースト リンディグレイ 90g×1
ハト ポリスター ポリッシングペースト ベージュ 85g×1
ハト ポリスター エマルジョン 50ml×1
価格 ¥8,400

Step1 中研磨

スコッチブライトとコンパウンドのW研磨パワーにより素早く研磨!

4280 L33

研磨剤含有スコッチブライトを豚毛ブラシで拭き取る

Step2 仕上げ研磨

バラけるので研磨中の熱を発生!

520-100/7 L23

豚皮は、季節や部位により厚さや硬さが均一ではない。本製品は化学繊維を使用し均一性を追求したレースブラシ。ポリスター ベージュとの併用で、艶やかな光沢を素早く放ち、保護膜を作る。

Step3 最終仕上げ研磨

綿糸パフで前工程のコンパウンドを拭き取ることで、より深いツヤを放つ。ポリスター エマルジョンを研磨対象面に塗布しパフ研磨することで、その光沢をより一層深める。

152-80BW L27

ハト ポリスター エマルジョン

届出番号 27B2X00041000168

ハト サーモボル セット

軟性レジンの研磨可能な研磨キット!

- 軟性レジン3ステップで短時間でカンタンにツヤを出す
- カーバイドバー等での切削キスを2ステップで徹底除去
- 砂研磨を使用しないので、作業場を汚さない

セット内容 ハトブラシ レース用 4280 (L33)×2
ハトブラシ レース用 869-100/14 (L32)×1
ハトミラバフ 868 100x50H×1
ハト ポリスター ポリッシングペースト リンディグレイ 90g×1
ハト ポリスター ポリッシング クリーム 90g×1
ハト ポリスタープロ ポリッシング ベースト ピンク150g×1
価格 ¥13,800

軟性レジン研磨キット

869-100/14 L32

ハトポリスター リンディグレイ 90g

4280 L33

ハトポリスタープロ ポリッシングペースト ピンク150g

868 100x50H

1,400

ハトポリスター クリーム 90g

Step1 中研磨

パワフルな研磨砥粒を含有したレースブラシ

4280 L33

ハト ポリスター リンディグレイ

研磨剤含有スコッチブライトを豚毛ブラシで拭き取る

Step2 仕上げ研磨

シリコンコートにより研磨時に毛羽立たない

869-100/14 L32

砥粒が研磨中に小さくなり大きなキスを除去

ハト ポリスター ポリッシングクリーム

シリコンコートした綿モスリンのレースブラシはコシと柔軟性を両立。研磨中に砥粒が小さくなっていくクリーム状コンパウンドと共に使用することで、大きな切削キスを徐々に小さく均す。

Step3 最終仕上げ研磨

超微細毛コットン使用 レースブラシ

ミラバフ 868 100x50H

超微細砥粒配合コンパウンド

ハト ポリスタープロ ポリッシングペースト ピンク

極細毛コットン生地使用の最終光沢研磨用レースブラシと超微細砥粒を配合したコンパウンドで研磨すると滑らかな表面をもたらす

届出番号 27B2X00041000169