


マスク併用でも効果を発揮する 進化したくもり止め



NEW SN-610 PAF

- ◆サイズ：W153×H48×D163(mm)
- ◆重量：31g ◆定価：¥3,800(税別)
- フレーム/プラスチック、エラストマー
- レンズ/ **PAF** (両面プレミアムくもり止め&ハードコート)

JIS規格品

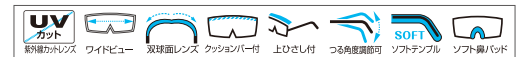

MADE IN JAPAN

新開発 PAF PREMIUM ANTI-FOG

継続的な使用や、長時間の使用にも耐えられるくもり止めコーティング


PAFコーティング ← → コーティングなし

※試験条件：沸騰水蒸気(約100℃)を用いた社内試験
SN-610 PAF 通常レンズ



PAFレンズの特性


PAFコーティングは従来品よりもふき取りや水洗いの耐久性を高めた親水性コーティングです。レンズ表面全体に薄い水膜を形成することで、くもりの原因となる水蒸気を親水化します。

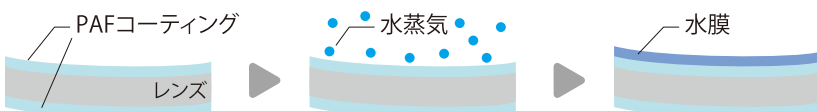

実験動画
公開中



診療後の保護メガネ・ルーペ 汚れていませんか？

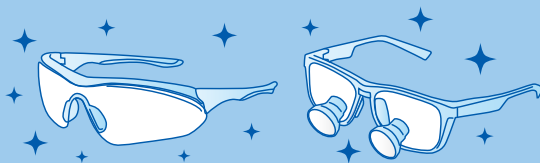

メガネの 除菌クリーナー

メガネの
新習慣

塩化ベンゼトニウム配合

アルコールフリー

液性：中性

お手頃サイズの
スプレーボトル

スプレーボトル
300mL
(レギュラーサイズ)

〈価格〉
1,500円
(税込 1,650円)



Point 1 診療後の飛沫、皮脂汚れを
かんたんスプレー洗浄！！

Point 2 レンズやフレームを傷めにくい
アルコールフリー&中性設計



【お得用】
2L
(ラージサイズ)


つめかえ用
スプレーボトル付

〈価格〉
6,000円
(税込 6,600円)

減容タイプ容器は使用后折りたたんで
廃棄でき、ゴミ削減が可能です。

SDメガネの除菌クリーナーの使用法


*使用上の注意をしっかりと読んでお使いください。

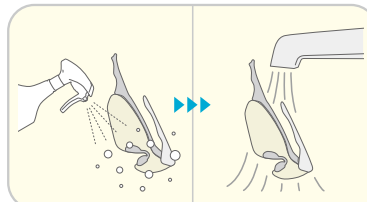

ユニパット双眼ルーペ・保護メガネ等

水洗できるもの

- ①メガネに本洗浄剤を直接噴霧してください。
- ②流水でじゅうぶんにすすいでください。
- ③やわらかい布等で、水分を拭き取ってご使用ください。

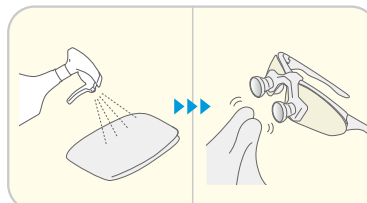

双眼ルーペ等

水洗できないもの

- ①本洗浄剤を浸み込ませた布等で、汚れを拭き取ってください。
- ②やわらかい布等で、しっかりと洗浄剤を拭き取ってご使用ください。

【使用上の注意】 ●取扱後は手、顔等をよく洗うがいをすること。 ●皮膚への影響があるため、医療用グローブを着用すること。また、眼に入らないように保護メガネ等を着用すること。その他防護具の着用をすること。 ●密栓し、直射日光の当たらない場所に施設して保管すること。 ●幼児の手の届かないところに保管すること。 ●ほかの洗浄剤等と混合して使用しないこと。 ●用途以外に使用しないこと。 ●本洗浄剤の液だれや液の飛び跳ねを放置すると結晶が発生するおそれがあるため、洗浄剤が付着した箇所はじゅうぶんに水で洗い流すこと。 ●容器を強く持つてキャップを開けると液が飛び出すおそれがある。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり締める。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付くおそれがある。

【警告】 ○軽度の皮膚刺激

※洗浄成分の性質上、温度変化により液が白濁する場合がありますが、性能には影響ありません。

SDメガネの除菌クリーナー

【用途】	歯科用双眼ルーペ・保護メガネなどの除菌・洗浄
【液性】	中性
【成分】	塩化ベンゼトニウム・陰イオン系界面活性剤・他
【容量】	2L (ラージサイズ)、300mL (レギュラーサイズ)